




neodisher[®] N

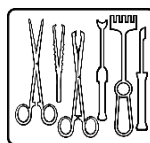

Agent acid de curățare și neutralizare pentru procesarea automată a instrumentelor, a sticlăriei de laborator și cuștilor de animale

Concentrat lichid

Domeniu de utilizare:

- Neutralizarea reziduurilor alcaline la curățarea automată a instrumentelor chirurgicale, ustensilelor de anestezie, containerelor, saboților de chirurgie și biberoanelor precum și a altor ustensile medicale
- Neutralizarea reziduurilor alcaline în cazul curățării automate a sticlăriei de laborator
- Curățarea preliminară acidă automată, respectiv curățarea sticlăriei de laborator
- Curățarea automată acidă a cuștilor de animale

Spectru de performanță:

- Îndepărtează colorații, calcarul, depunerile de urină și alte impurități solubile în acizi
- Adekvat pentru obiecte din sticlă, ceramică, oțel inoxidabil, materiale plastice rezistente la acizi și materiale din cauciuc
- Inadekvat pentru metale neferoase, piese cromate și nichelate, precum și aluminiu eloxat

Caracteristici deosebite:

- Capacitate foarte bună de clătire
- Fără surfactanți

Mod de utilizare și dozare:

neodisher N se utilizează în aparate de curățare și de dezinfectie pentru neutralizare și pentru curățare preliminară, respectiv curățare. Dozarea depinde, printre altele, de aplicare.

Următorii parametri trebuie respectați pentru utilizarea neodisher N:

Neutralizare în cazul procesării automate a instrumentelor termostabile și termolabile și altor ustensile medicale, precum și sticlăriei de laborator	1 - 2 ml/l
Curățarea preliminară acidă automată, respectiv curățarea sticlăriei de laborator	2 - 4 ml/l 40 - 60 °C
Curățarea automată acidă a cuștilor de animale	3 - 4 ml/l 60 - 80 °C

Pentru dozare se vor utiliza aparate de dozare adecvate.

Pentru evitarea petelor de apă se recomandă utilizarea apei complet demineralizate în clătirea finală.

Soluția de aplicare neodisher N trebuie clătită complet cu apă (de preferință, complet demineralizată).

În cazul utilizării neodisher N pentru curățare preliminară, respectiv curățare trebuie să se țină cont de rezistența acidă a articolului de spălat, a aparatului de curățare și de dezinfectie și a conductelor de evacuare. Eternit și conductele de evacuare din fontă sunt inadecvate și impun o neutralizare preliminară a soluției evacuate.

Indicații generale cu privire la utilizare:

- Numai pentru utilizări industriale.
- Nu amestecați cu alte produse.
- Înainte de schimbarea produsului, clătiți cu apă sistemul de dozare, inclusiv furtunurile de aspirare.
- Procesarea trebuie realizată corespunzător legislației privind dispozitivele medicale și



neodisher® N

reglementărilor în vigoare cu proceduri validate adecvate.

- Vă rugăm să aveți în vedere recomandările de procesare ale producătorului dispozitivelor medicale corespunzător cerințelor DIN EN ISO 17664, recomandările de curățare ale producătorilor sticlăriei de laborator, precum și recomandările de procesare ale producătorilor cuștilor de animale și recomandările cercului de lucru pentru procesarea cuștilor (AK KAB) în ediția actuală a broșurii AK KAB „Realizarea corectă a procesării cuștilor de animale”.
- Instrucțiunile de operare ale producătorului aparatului de curățare și de dezinfecție trebuie respectate.

Date tehnice:

Valoarea pH-ului	2,2 - 1,8 (1 - 4 ml/l, stabilită în apă complet demineralizată, 20 °C)
Vâscozitate	< 50 mPa s (concentrat, 20 °C)
Densitate	circa 1,5 g/cm ³ (20 °C)
Factor de titrare	0,16 (conform instrucțiunilor de titrare neodisher)

Substanțe conținute:

Substanțe conținute pentru agenți de curățare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004 privind detergenții:

> 30 % fosfați

Marcaj CE:  

neodisher N îndeplinește specificațiile rezultate din legislația europeană privind dispozitivele medicale.

Dacă apare un incident grav cu acest produs, acesta trebuie raportat producătorului și autorității competente.

Indicații pentru depozitare:

În timpul depozitării trebuie respectată o temperatură între -15 și 30 °C. În caz de depozitare corespunzătoare, poate fi depozitat pentru 3 ani. A se folosi până la: vezi inscripția de pe etichetă în spatele simbolului .

Indicații privind pericolele și siguranța:

Informații privind siguranța, precum și privind mediul înconjurător găsiți în fișele cu date de securitate. Acestea sunt disponibile pe www.drweigert.de în rubrica „Service/Downloads”.

Eliminați ambalajele numai golite complet și închise. Eliminarea resturilor de umplere: vezi fișa cu date de securitate.

MB 4201/3-1 Data 03/2020